

Surgical Plume Evacuation Pencil

Med en integreret teleskopfunktion, der giver en øjeblikkelig løsning til både dybe og overfladiske incisioner alt efter behov



Hver gang der skabes kirurgisk røg på operationsstuen, bliver operationspersonale udsat for en risiko. Løsningen er lige for hånden med den nye, unikke Plume Evacuation Pencil (diatermipen med røgsug), en fremragende løsning, der sikrer minimeret udsættelse for røg og tydelig visualisering af operationsfeltet. Det sætter din og dine patienters sikkerhed først.

- Et unikt, alt-i-en, letvægts, smalt design med integreret teleskopfunktion, hvilket giver en umiddelbar løsning til både dybe og overfladiske incisioner.
- Mölnlycke Plume Evacuation Pencil tilbyder en bæredygtig løsning, DEHP og PVC fri.
- Meget høj sugekapaцитet (95 l/min) hvilket minimerer udsættelsen for røg og giver hurtig visualisering af operationsfeltet.
- Fås i både dine kundetilpassede procedurepakker samt sterilt, enkeltpakket.


Tekniske data

Valg af elektroder:

Rustfri stål **1** til hurtige, enkle opgaver.

Coated PTFE **2** til reduceret afbrydelse af operationen pga. ophobning af væv.

Isoleret PTFE **3** til reduceret risiko for utilsigtet beskadigelse af væv når man opererer på trange områder.

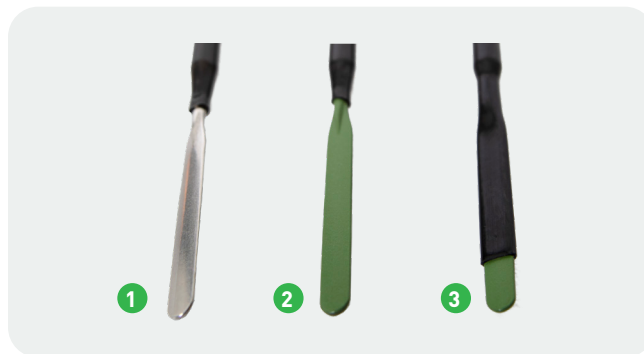

360° drejeligt håndtag muliggør bevægelsesfrihed og reducerer risikoen for træthed i håndledet

Universal 22mm forbindelse passer til alle røgsugmaskiner

Smal diameter sikrer præcis kontrol og større visualisering, især i trange områder

Praktisk 4 meter kabel

Bestillingsinformation (enkeltpakket, steril)

Varenr.	Beskrivelse	Inderæske	Trp. karton
420100	Plume Evacuation Pencil, PTFE elektrode	20	40
420101	Plume Evacuation Pencil, PTFE isoleret elektrode	20	40
420102	Plume Evacuation Pencil, rustfri stål elektrode	20	40

Juridisk producent: Prima Medical Limited.
Importeret og distribueret af: Mölnlycke Health Care AB

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen.
©2024 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0282406


Mölnlycke[®]